

Barres Parallèles de Rééducation à la Marche

Réf. KIN-BARRES-PARA

Rééducation fonctionnelle

A3 Med

FABRIQUÉ
EN TUNISIE**Montage sur site**
mise en service et
formation**Livraison**
dans les 24
gouvernorats**SAV local**
pièces détachées à
Ariana

Barres parallèles pour la rééducation à la marche : cadre en tube acier peinture époxy, plateau en panneau de particules recouvert de caoutchouc, largeur 65 cm. Longueur 2,50 m.

LES + PRODUITS

- + **Double appui à hauteur de main** : la reprise d'appui en sécurité
- + **Plateau recouvert de caoutchouc** : surface antidérapante et repère de trajectoire
- + **Largeur 65 cm**, longueur 2,50 m
- + **Cadre tube acier**, peinture époxy
- + Livrées et mises en place sur site


2,50m
LONGUEUR**65 cm**
LARGEUR**Tube acier, peinture époxy**
CADRE**Tunisie**
FABRICATION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE	Barres parallèles de rééducation à la marche
LONGUEUR	2,50 m
LARGEUR	65 cm
PLATEAU	Panneau de particules recouvert de caoutchouc
CADRE	Tube acier, peinture époxy
FABRICATION	Tunisie

Barres Parallèles de Rééducation à la Marche

Réf. KIN-BARRES-PARA

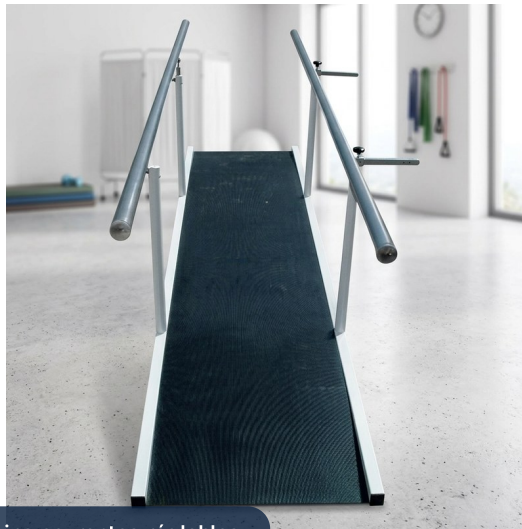

Plateau recouvert de caoutchouc et mains courantes réglables

BON À SAVOIR

Les barres existent-elles en d'autres longueurs ?

La longueur figure parmi les adaptations possibles puisque la fabrication est locale. Précisez la longueur utile dont vous disposez dans votre salle et nous vous confirmons la faisabilité et le tarif au devis.

Les mains courantes sont-elles réglables ?

Les montants permettent d'ajuster la hauteur des mains courantes à la taille du patient, ce qui est indispensable : une barre trop haute fait travailler les épaules au lieu des membres inférieurs, une barre trop basse penche le patient en avant.

COMMANDE

Prix et disponibilité sur demande

Devis B2B gratuit sous 24 h ouvrées, prix fixé par écrit. Appels d'offres : fiche technique et déclaration de conformité fournies selon le modèle.

LIVRAISON, MONTAGE ET SAV

Livraison dans les 24 gouvernorats, montage sur site, mise en service et formation pour les modèles motorisés, SAV et pièces détachées à Ariana : conditions précisées sur le devis.

DANS LA MÊME GAMME

Cage de Poulithérapie à 4 Panneaux (2 m x 1 m) · KIN-CAGE-POULIE

Chaise Quadriceps de Renforcement Musculaire · KIN-CHAISE-QUAD

Appareil de Rééducation de la Cheville · KIN-CHEVILLE